

# Brillas

*Hidroxiapatita cálcica*



MADE IN ISRAEL 

  
**Refimax**  
— medicina y estética —



Calle 33 # 74E-80 Medellín-Antioquia, Colombia.



Celular: +57 316 421 8333



ventas@refimax.co



www.refimax.co

# NUESTRO RELLENO DE HIDROXIAPATITA CÁLCICA

- Relleno dérmico inyectable reabsorbible y biocompatible, compuesto por microesferas de hidroxapatita cálcica.
- Está diseñado para restaurar el volumen facial y los contornos naturales del rostro al promover la generación de colágeno.
- La hidroxapatita cálcica es un material biocompatible, componente natural del cuerpo humano y el principal material en los dientes y huesos.



Presentación: Caja por 2 jeringas de 1 ML.

- Microesferas sintéticas de hidroxapatita cálcica (CaHA) de 25-45 micras de diámetro.
- Concentración del 55,7% (p/p).
- Gel portador acuoso que comprende glicerina carboximetilcelulosa sódica, tampón fosfato y clorhidrato de lidocaína (3mg/ml).
- Se suministra en una jeringa de vidrio graduada precargada.

*GENERA VOLUMEN, FIRMEZA,  
ES DE FÁCIL APLICACIÓN Y TIENE  
UN EFECTO PROLONGADO*

# VENTAJAS

- Promueve la generación de nuevo colágeno natural.
- Provee un efecto voluminizador y de lifting.
- Experiencia clínica extensiva y protocolo de aplicación seguro.
- Mínima molestia durante el tratamiento debido a la adición de lidocaína.
- Biocompatible y biodegradable.
- Duración entre 12 - 24 meses.

## ÁREAS DE TRATAMIENTO



Cejas

Pómulos

Línea  
mandibular

Lifting  
sin cirugía

Puente  
de la nariz

Pliegues  
nasolabiales

Mentón

Dorso  
de la mano

# MECANISMO DE ACCIÓN

INMEDIATO




Las áreas de inyección se llenan y se elevan, dando como resultado un excelente efecto instantáneo.


LARGO PLAZO




Las microesferas de hidroxipatita forman estructuras de soporte que favorecen el crecimiento de los fibroblastos que producen y depositan nuevo colágeno, un agente voluminizador natural en las regiones faciales. La degradación es sincrónica con el depósito de nuevo colágeno en el área de inyección, proporcionando un aspecto juvenil y natural de larga duración.

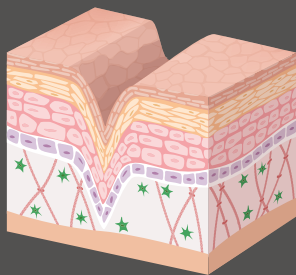


Piel envejecida

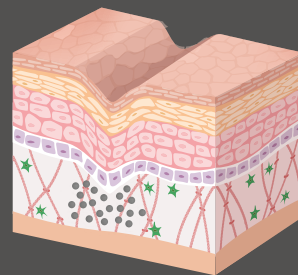

Efecto lifting y de relleno inmediato

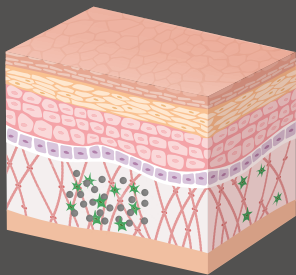

El crecimiento de los fibroblastos induce el depósito de nuevo colágeno

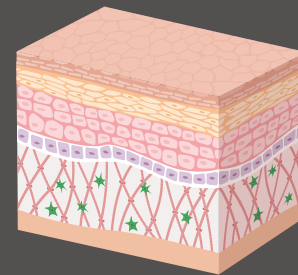

Efectos completos y a largo plazo sincronicos con la degradación del material


 Colágeno

 Fibroblastos


 Brillas




## ALTA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE Y RESULTADOS

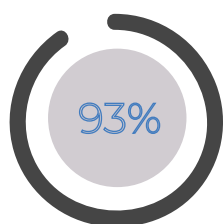

Pacientes que recomiendan este tratamiento

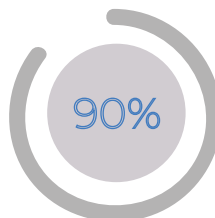

Pacientes que están satisfechos con este tratamiento

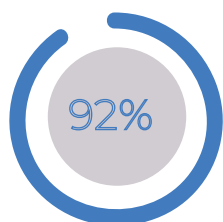


Pacientes que volverían a realizárselo








Pacientes que experimentan resultados superiores post tratamiento

## MORFOLOGÍA DE LAS MICROESFERAS

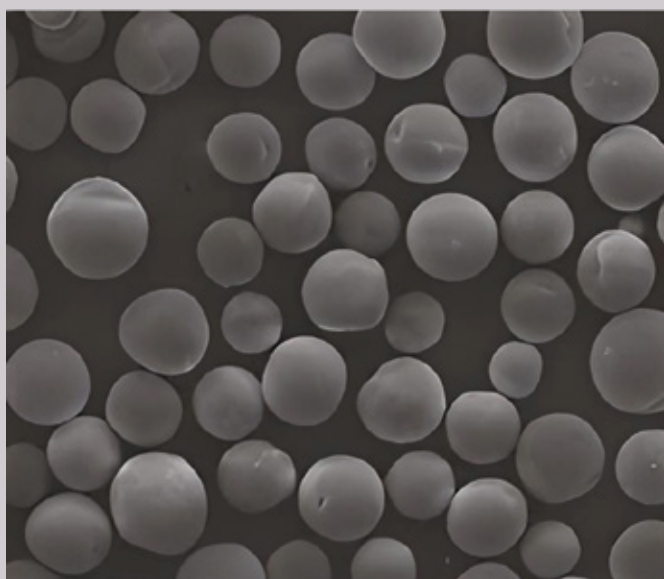

Micrografías electrónicas de barrido x 505

- Brillas se compone de microesferas de hidroxiapatita cálcica redondas, no porosas y lisas.
- El tamaño de las microesferas (25-45 micras de diámetro) facilita la extrusión
- Minimiza el riesgo de migración de partículas por fagocitos, garantizando un aspecto armonioso.

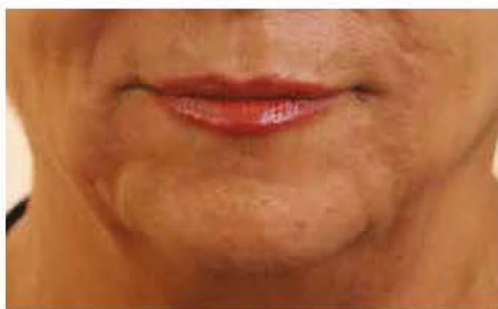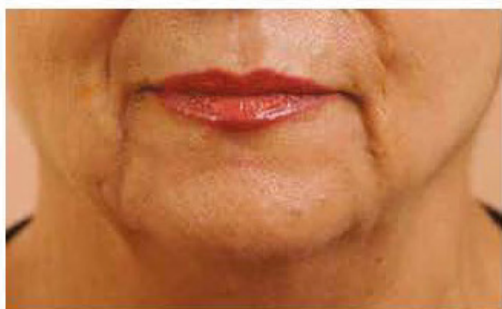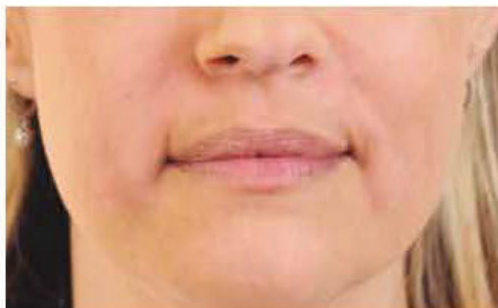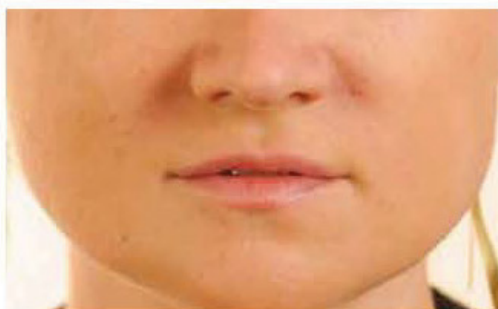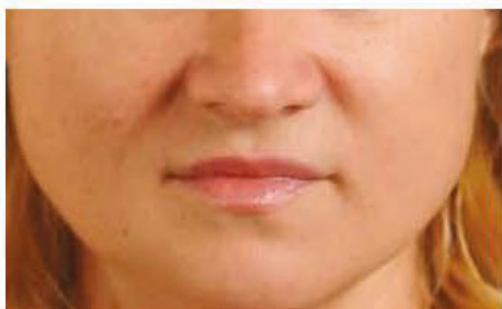

Las imágenes no han sido manipuladas